

KIT PARA TRATAMIENTOS DE SUELO PÉLVICO


Tecnología para la salud íntima





RÖS'S presenta su ampliación de software y su kit de accesorios exclusivos para tratamientos de suelo pélvico. Disponible para los modelos tecnológicos Intradermik y Binary Premium, permite al fisioterapeuta incrementar las posibilidades de tratamientos en patologías de suelo pélvico femenino y masculino.


LA AMPLIACIÓN DE SOFTWARE PERMITE TRABAJAR LA ELECTROESTIMULACIÓN EN SINERGIA CON LA ENERGÍA TECARpro

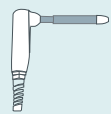

APLICACIÓN RESISTIVA

Electrodo con diseño exclusivo, seguro, ergonómico y eficaz.


Activación de la vascularización de la zona tratada.

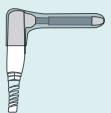

APLICACIÓN CAPACITIVA

Gracias a la funda ecográfica, transformamos la emisión de resistiva en capacitiva.

Recuperación de los tejidos más ricos en agua, como piel y mucosas.

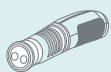

APLICACIÓN ELECTRO-SONDA

Sonda de electroestimulación compatible con los conectores RÖS'S.

Recuperación muscular, mejora del tono y alivio de dolor.

TRATAMIENTOS

HIPOTONIA MUSCULAR

- Prolapsos genitales
- Incontinencias urinarias, gaseosas y fecales
- Disminución de la sensibilidad

FALTA DE FUERZA

- Incontinencias
- Disminución de la sensibilidad

HIPERTONIA MUSCULAR

- Dispareunía
- Vaginismo
- Contracturas
- DPC

OTROS

- Edemas
- Lesiones directas (cicatrices, fisuras)
- Patología ligamentosa
- Piel y mucosas
- Puntos gatillo
- Dolor pélvico crónico
- Sequedad vaginal



Los beneficios de la combinación de electroestimulación y energía TECARpro ya han sido probados en el Ensayo piloto de Anna Abelló *"Tratamiento multimodal de terapia manual, diatermia y diatermia con estimulación nerviosa transcutánea en dispareunia asociada al cáncer de mama"* probados en una muestra de 18 pacientes.

La reducción en los tiempos de recuperación, así como en el grado de satisfacción final, mejoraron susceptiblemente la calidad de vida de los pacientes.

ANNA ABELLÓ

Fisioterapeuta con un extenso Curriculum especializado en suelo pélvico.

La ampliación de software cargará en su equipo el paquete de señales de electroestimulación específicas para suelo pélvico.

Nombre	Características	Efecto
TONIFICACIÓN MUSCULAR EMS 	Ancho de pulso: 250 µs. Frecuencia: 35 Hz. Tiempo de contracción: 6 seg. Tiempo de subida: 1 seg. Tiempo de relajación: 6 seg.	Induce a la contracción muscular para mejorar su tono. Indicada en todas las disfunciones donde haya hipotonía muscular o atrofia
FUERZA MUSCULAR EMS 	Ancho de pulso: 275 µs Frecuencia: 50 Hz Tiempo de contracción: 6 seg. Tiempo de subida: 1 seg Tiempo de relajación: 5 seg.	Induce a la contracción muscular mejorando la resistencia muscular. Indicada en todas las disfunciones donde haya hipotonía muscular o atrofia
TENS 	Ancho de pulso: 100 µs Frecuencia: 80 Hz Tiempo de contracción: 4 seg. Tiempo de subida: 1 seg Tiempo de relajación: 4 seg Emisión: tren de 3 pulsos	Analgesia inducida por neuroestimulación transcutánea o percutánea para el alivio del dolor crónico o agudo. Indicada cuando hay presencia de dolor. Apropiaada para las primeras fases del tratamiento

KIT SUELO PÉLVICO PARA INTRADERMIK
Código 08BP071

KIT SUELO PÉLVICO PARA BINARY PREMIUM
Código 08BP070



Código	Accesorio	Cantidad
04BP010	SONDA ENDOCAVITARIA ELECTROESTIMULACIÓN	1
40R0R11	PUNTA PLASTICO PARA ELECTRODO RESISTIVO	4
40R0R01	ELECTRODO RESISTIVO ENDOCAVITARIO	1
9901035	FUNDA LATEX	6
33BI391	CABLE ELECTROESTIMULACION	1

RÖS'S
Tecnología avanzada